

Compact 6 HD

Compact 6 HD com Fala

**Guia do Usuário • Ampliador Portátil HD
e Ampliador Portátil HD com Fala**



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

PUBLICADO POR

Optelec

Pesetastraat 5a

2991 XT

Barendrecht, Holanda

www.optelec.com

E POR

Tecassistiva

Av. Dr. Altino Arantes, 345 Vila Clementino

São Paulo - SP

CEP 04042-032 - Brasil

Telefone/Fax: (11) 3266-4311

E-mail: teca@tecassistiva.com.br

www.tecassistiva.com.br



TECASSISTIVA

Technology & Accessibility

As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou meio eletrônico ou mecânico, para qualquer finalidade, sem a permissão expressa por escrito da Optelec e da Tecassistiva.

© 2019 Tecassistiva. Todos os direitos reservados.

Suporte técnico

Para entrar em contato com o **Suporte técnico** por telefone, os clientes podem ligar para **(11) 3266-4311**, de segunda a sexta-feira, das 8:30 às 17:30.


Para entrar em contato por e-mail, envie perguntas para **suporte@tecassistiva.com.br**.

Para pesquisar na base de conhecimento, visite **www.tecassistiva.com.br** e escolha o link **Suporte**.

Índice

Introdução	6
Sobre este manual	6
O que está na caixa?	7
Começando	8
Usando o Compact 6 HD com o suporte de leitura	8
Limpendo a lente da câmera	11
Botões	12
Ligar e desligar	12
Suspender e retomar	13
A lente de aumento e as câmeras de visão geral	13
Bloquear Foco	13
Usando o botão de foto	14
Usando o Compact 6 HD com Fala para conversão de texto em fala e OCR	15
Ativando a fala	15
Ajustando o volume e a velocidade de leitura	16
Ajustando o idioma e a voz	16
Modo de tabela	16
Carregando a bateria	17
Aviso de bateria	17
Suspender	17
Modo fácil e avançado	18
Recursos no modo fácil	20
Ajustando a ampliação	20
Selecionando um modo de visualização	20
Recursos no modo Avançado	21
Hora e data	21
Menu	21

Abrindo e fechando o menu	21
Voz (somente Compact 6 HD com fala)	23
Selecionando uma voz, idioma e idioma do menu	23
Adicionando ou removendo uma voz ou idioma	23
Ajustando o idioma e a voz no Modo Fácil	23
Linha Ligado / Desligado	23
Status da bateria	24
Acerca	24
Salvar	24
Abrir	24
Eliminar	25
Ajustando o brilho	25
Configurações	25
Cor	26
Visualizar (somente Compact 6 HD com fala)	26
Miracast: conexão sem fio a um monitor ou TV	27
Bluetooth (apenas Compact 6 HD com fala)	28
Linha	29
Botões	29
Tema	29
Colunas (apenas Compact 6 HD com fala)	29
Luz	30
Som	30
Suspender	30
Idioma (somente Compact 6 HD)	30
Restaurar	30
APÊNDICE A: Informação técnica	31
APÊNDICE B: Segurança	33
APÊNDICE C: Condições de garantia	34

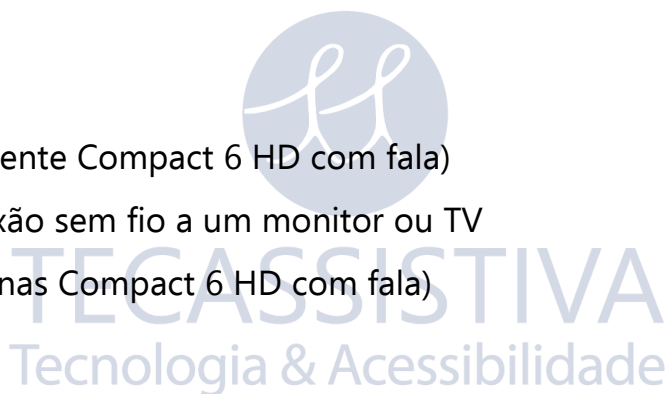

Aviso WEEE

A diretiva sobre Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE), que entrou em vigor como lei europeia em 13 de fevereiro de 2003, resultou em uma grande mudança no tratamento de equipamentos elétricos em fim de vida.

O objetivo da presente diretiva é, como primeira prioridade, a prevenção dos REEE e, além disso, promover a reutilização, a reciclagem e outras formas de valorização desses resíduos, de modo a reduzir a sua eliminação.



O logotipo WEEE (mostrado à esquerda) no produto ou na caixa indica que este produto não deve ser descartado ou descartado com o lixo doméstico.

■ Você é responsável por descartar todos os seus equipamentos eletrônicos ou elétricos, transferindo-os para o ponto de coleta especificado para a reciclagem de tais resíduos perigosos. A coleta isolada e a recuperação adequada de seus equipamentos eletrônicos e elétricos no momento do descarte ajudarão a conservar os recursos naturais. Além disso, a reciclagem adequada dos equipamentos de resíduos eletrônicos e elétricos garantirá a segurança da saúde humana e do meio ambiente. Para obter mais informações sobre descarte, recuperação e pontos de coleta de equipamentos eletrônicos e elétricos, entre em contato com o centro da cidade local, o serviço de descarte de lixo doméstico, a loja onde você adquiriu o equipamento ou o fabricante do equipamento.

Introdução

Parabéns por escolher o Compact 6 HD ou Compact 6 HD com Fala!

O exclusivo ampliador de vídeo eletrônico de 6 polegadas com tela sensível ao toque e tamanho de bolso da Optelec permite que você visualize e amplie texto e imagens impressos em qualidade HD de alta resolução e coloridas ou de alto contraste. Com seu monitor de 6 polegadas, duas câmeras, interface de tela de toque personalizável e acessórios exclusivos, você pode personalizar seu Compact 6 HD e adequá-lo às suas necessidades pessoais.

Se você tiver dúvidas ou sugestões sobre o uso deste produto, entre em contato com seu distribuidor ou com a sede da Optelec, usando as informações de contato na última página deste manual. Seu feedback é importante. Esperamos que você goste do seu Compact 6 HD!

Sobre este manual

A Optelec está constantemente melhorando nossos produtos e suas funcionalidades. Portanto, é possível que este manual não seja a versão mais recente. Faça o download do manual mais atualizado em www.tecassistiva.com.br na seção Suporte.

Este manual irá familiarizá-lo com os recursos e operação básica do Compact 6 HD e Compact 6 HD com Fala. Por favor, leia atentamente este manual antes de usar o seu dispositivo. Salvo indicação contrária, todas as referências ao Compact 6 HD também se aplicam ao Compact 6 HD com fala. A funcionalidade especificamente aplicável para o Compact 6 HD com Fala está marcada com o logotipo de fala.



Logotipo de fala

O que está na caixa?

A embalagem do Compact 6 HD contém o seguinte:

- O ampliador de vídeo Compact 6 HD ou Compact 6 HD com Fala e o suporte de leitura;
- Uma bolsa de proteção;
- Uma pulseira;
- Uma fonte de alimentação USB com cabo USB-C;
- Adaptador de tomada padrão Brasileiro;
- Um conversor de plugue de áudio USB para 3,5 mm;
- Um pano de limpeza de tela;

Se algum desses itens estiver faltando no seu pacote, entre em contato com a Tecassistiva.



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

Começando

O Compact 6 HD é colocado corretamente à sua frente quando a tela está voltada para cima, e o botão branco de foto, e o botão laranja liga / desliga estão nos cantos superior da tela.



1. Botão liga / desliga.
2. Botão de foto.
3. USB conector.

Usando o Compact 6 HD com o suporte de leitura

O Compact 6 HD é entregue com um suporte de leitura. Quando colocado no suporte de leitura, o Compact 6 HD pode ser usado com o suporte de leitura fechado ou aberto.

Na posição **aberta**, a tela será ajustada em um ângulo ergonômico para leitura e a câmera da lupa será ativada. A posição aberta permite que você leia textos mais longos.




Na posição **fechada**, a câmera de visão geral está sendo usada. Segure a unidade na sua mão e aponte a câmera (localizada na parte de trás da unidade) para o objeto ou texto que você deseja ver ou ler. A posição fechada é ideal para digitalização ou visualização rápida de documentos ou objetos.



Para **inserir** o Compact 6 HD no suporte de leitura, siga estas etapas:


1. Insira o Compact 6 HD na parte inferior do suporte de leitura.
2. Pressione para travar o Compact 6 HD no suporte de leitura.
3. O Compact 6 HD está agora travado no suporte de leitura.

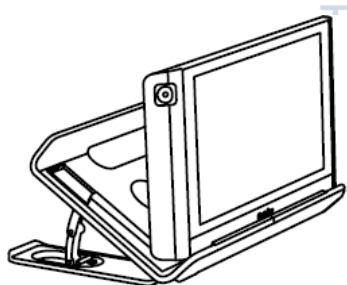

Passo 1




Passo 2

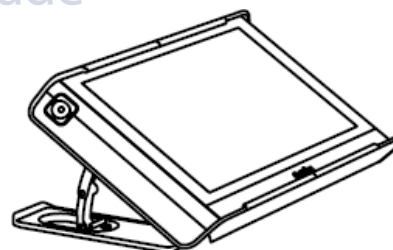

Passo 3

Para **remover** o Compact 6 HD do suporte de leitura, siga estas etapas:

1. Abra o suporte de leitura.
2. Coloque 2 dedos nos recuos na parte de trás.
3. Pressione suavemente para remover o Compact 6 HD do suporte.

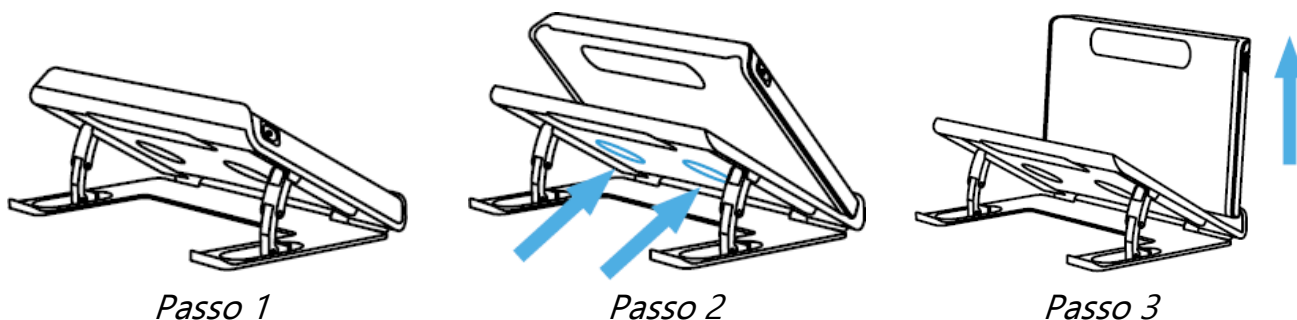

Para **abrir** o suporte de leitura, siga estas etapas:

1. Coloque o Compact 6 HD na sua frente para que a tela fique voltada para cima e o botão branco da foto e o botão laranja liga / desliga estejam na parte superior da tela.
2. Abra os pés do suporte e o Compact 6 HD será ligado.

Para **fechar** o suporte de leitura, siga estas etapas:

1. Coloque o Compact 6 HD na sua frente para que a tela fique voltada para cima e o botão branco da foto e o botão laranja liga / desliga estejam na parte superior da tela.
2. Pressione suavemente o Compact 6 HD para baixo para fechar o suporte de leitura.

Limpendo a lente da câmera

Para uma imagem de qualidade ideal, recomenda-se que a lente da câmera e a janela de luz do objeto sejam mantidas limpas. Uma lente de câmera suja resultará em uma imagem confusa e pode causar um foco incorreto no foco automático. Para limpar a lentes da câmera, use o pano de limpeza fornecido ou outro pano macio de limpeza de lentes.

Nota: Não use água ou agentes de limpeza para limpar a lente da câmera.



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

Botões

O Compact 6 HD possui os seguintes botões:

Botão liga / desliga



Um breve toque no botão laranja, localizado no canto superior esquerdo, colocará o Compact 6 HD no modo de suspensão ou retomará a unidade. Um toque de 3 segundos nesse botão desliga ou liga a unidade novamente.

Botão de foto



O botão de foto localizado no canto superior direito da unidade permite tirar uma foto temporária de um texto ou imagem distante, permitindo aproximar a imagem. Se você possui um Compact 6 HD com fala, o Compact 6 HD extrai o texto da foto e o lê em voz alta.

Conector USB



O conector USB branco está localizado no lado direito no canto inferior do Compact 6 HD. O cabo USB fornecido conecta-se a esta porta USB e fonte de alimentação. Use apenas a fonte de alimentação que acompanha o Compact 6 HD para alimentar e carregar a unidade. Use o cabo conversor USB para áudio de 3,5 mm para conectar alto-falantes ou um fone de ouvido.

Câmeras



As câmeras do Compact 6 HD estão localizadas na parte traseira da unidade.

Ligar e desligar

Para ligar o Compact 6 HD pela primeira vez, é necessário carregar a unidade. Uma vez carregado, pressione o botão liga / desliga laranja localizado no canto superior esquerdo da tela por três segundos. Para desligar o Compact 6 HD, pressione o botão laranja por três segundos novamente. Ao ligar o Compact 6 HD, levará aproximadamente 25 segundos para que uma imagem seja exibida na tela.


Suspender e retomar

Quando o Compact 6 HD é ligado, um breve toque no botão laranja de energia coloca a unidade no modo de suspensão. Um toque breve no botão liga / desliga laranja retomará a operação do Compact 6 HD no modo em que estava quando foi colocado no modo de suspensão. Ao sair do modo de suspensão, o Compact 6 HD leva aproximadamente 1 segundo antes que uma imagem seja exibida na tela.

Quando o Compact 6 HD está no modo de suspensão, a unidade também pode retomar abrindo o suporte de leitura do Compact 6 HD. Fechar o suporte de leitura o colocará novamente no modo de suspensão.

A lente de aumento e as câmeras de visão geral

O Compact 6 HD é equipado com duas câmeras, uma câmera de ampliação e uma câmera de visão geral.

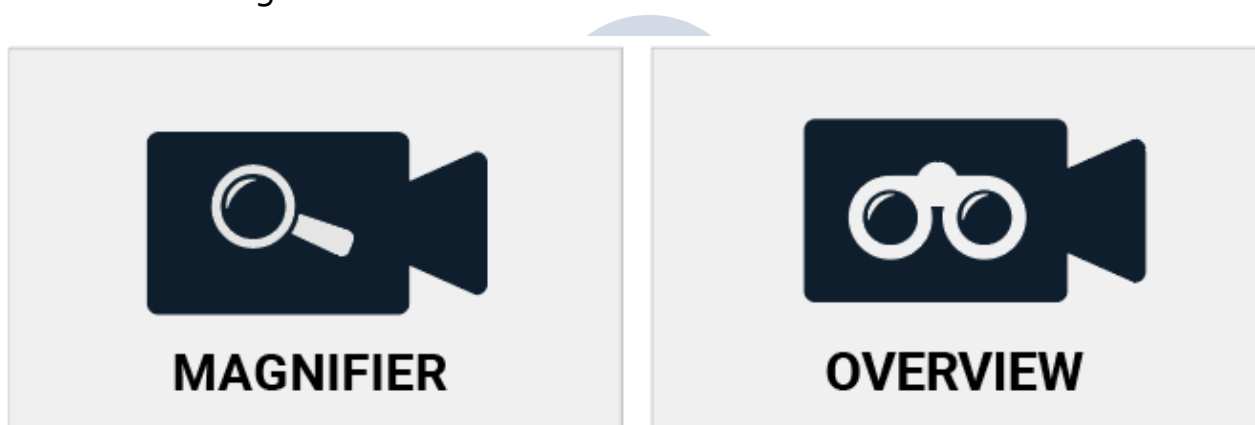

Quando o suporte estiver sendo aberto, o Compact 6 HD será ligado e selecionará automaticamente a câmera do ampliador. Quando você liga o Compact 6 HD com o suporte fechado, a câmera de visão geral será ativada. A câmera de ampliação é otimizada para leitura de texto no suporte de leitura, enquanto a câmera de visão geral é otimizada para observar objetos a uma curta distância. Para alternar entre as câmeras, toque na tela e toque no ícone da câmera na parte superior da tela.

Bloquear Foco

O foco automático da câmera de visão geral pode ser bloqueado para escrever ou visualizar objetos a uma distância fixa. Para bloquear o foco, toque na tela por 2 segundos. Para desbloquear o foco, toque no botão de bloqueio de foco na parte superior da tela ao lado do ícone de troca da câmera.

Usando o botão de foto

O botão de foto permite que você tire uma foto temporária de um texto ou uma imagem.

1. Segure ou coloque o Compact 6 HD sobre o texto ou imagem que você deseja capturar.
2. Pressione o botão de foto localizado no lado superior direito da unidade para tirar a foto.
3. Ao aproximar o Compact 6 HD dos seus olhos, você poderá ver o objeto ou o texto de perto.
4. Pressione o botão de foto novamente para retornar ao modo de vídeo ao vivo. Agora é possível tirar uma nova foto.

Para salvar ou excluir instantâneos, consulte o capítulo 7.



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

Usando o Compact 6 HD com Fala para conversão de texto em fala e OCR



Se você possui um Compact 6 HD com Fala, tirar uma foto ativa a funcionalidade de fala. O Compact 6 HD com Fala extrai o texto da imagem e lê o texto em voz alta.

Ativando a fala

Para tirar uma foto e ativar a fala:

- Posicione o texto ou parte do texto na visualização da câmera e pressione o botão de foto. Para obter um resultado ideal, verifique se há luz suficiente no ambiente, evite sombras e limite o texto apenas à parte do documento que você deseja ler. Se o texto exibido for muito pequeno, o reconhecimento perderá precisão e poderá falhar.
- Uma barra de progresso será exibida. O Compact 6 HD com Fala começará a ler após o término do processo de reconhecimento.
- Use o botão Reproduzir/Pausar para iniciar ou parar a leitura
- Toque e segure (toque longo) no texto para começar a ler a palavra ou seção para a qual você aponta.
- Toque no botão "Contraste" para exibir o texto em cores de alto contraste. O texto será formatado em uma coluna para caber na largura da tela. Na visualização de alto contraste, as imagens não serão mostradas. Pressione o botão "Contraste" para alternar entre as várias opções de alto contraste e o modo de cores. No modo de cores, as imagens serão mostradas, bem como o layout original do texto.
- Se nenhum texto for encontrado, uma mensagem "Nenhum texto encontrado" aparecerá ao pressionar o botão "Reproduzir".
- Para alterar o idioma e a voz, consulte o capítulo 5.

Ajustando o volume e a velocidade de leitura

Para ajustar o volume ou a velocidade de leitura, ative a barra de botões com um único toque. Toque no botão Áudio para exibir os controles deslizantes "Volume" e "Velocidade". Os controles deslizantes "Volume" e "Velocidade" estão presentes apenas na visualização de foto.

Ajustando o idioma e a voz

Para ajustar o idioma ou a voz no Modo Fácil, pressione e segure o botão "Áudio" para ir para o menu Voz. Para ajustar o idioma ou voz no Modo Avançado, pressione o botão "Menu" e depois pressione o menu "Voz". Consulte o Capítulo 7, Voz, para obter mais informações sobre como navegar no menu "Voz".

Modo de tabela

O modo de leitura regular lê colunas, ideal para jornais e revistas. Mas, ocasionalmente, você pode querer ler um menu, recibo, tabela ou outro texto que tenha um layout semelhante a uma tabela.

Ao pressionar e segurar o botão Foto, o Compact 6 HD com fala vai ler todo o texto capturado por linha da esquerda para a direita primeiro e, em seguida, passar para a próxima linha. Ao sair do modo, foto e tirar outra foto, você retornará automaticamente ao modo de leitura normal.

Carregando a bateria

O Compact 6 HD é fornecido com uma fonte de alimentação e plugue de energia específico para o Brasil. Conecte o plugue de energia correspondente e conecte-o à fonte de alimentação.

Para carregar o Compact 6 HD, conecte o cabo USB fornecido à fonte de alimentação e o conector USB branco localizado no lado direito da unidade.

Conecte a outra extremidade da fonte de alimentação a uma tomada.



O carregamento do Compact 6 HD leva aproximadamente 2 horas. Um Compact 6 HD totalmente carregado pode operar por um tempo médio de 3 horas, dependendo das configurações de energia. Por motivos de segurança, use apenas a fonte de alimentação e o cabo USB fornecidos com o Compact 6 HD para carregar a bateria da unidade.

Aviso de bateria

O Compact 6 HD mostrará brevemente um ícone de aviso de bateria vazia para indicar que a bateria precisa ser carregada. Quando isso ocorrer, certifique-se de carregar sua unidade. Quando a bateria estiver vazia, a unidade será desligada automaticamente.

Se o Compact 6 HD não ligar, verifique se ele está carregado.

Suspender

O Compact 6 HD pode entrar automaticamente no modo de suspensão se nenhum botão for pressionado ou nenhum movimento for detectado. Pressionar o botão laranja liga / desliga o ligará novamente. O tempo de espera pode ser alterado ou desativado no menu Compact 6 HD. Por favor, consulte o próximo capítulo sobre como alterar essas configurações.

Modo fácil e avançado


Ao usar a unidade pela primeira vez, ela será inicializada no modo Fácil. Para alternar entre os modos Fácil e Avançado, pressione e segure o botão Modo e toque em Fácil ou Avançado.

No modo Fácil, você tem acesso aos principais recursos:

- Ajustando a ampliação;
- Selecionando um modo de visualização;
- Tirando uma foto;
- Se você possui um Compact 6 HD com fala,
 - O texto da foto será lido em voz alta;
 - O idioma, voz, velocidade de leitura e volume podem ser ajustados.
- Alternando entre a lupa e a câmera de visão geral.

No modo Avançado, você tem as mesmas funções do modo Fácil, além de alguns recursos adicionais:

- Hora e data;
- Acesso ao menu com opções para:
 - Salvar e abrir fotos;
 - Mudar o idioma e voz de leitura;
 - Alterando modos de cor;
 - Habilitando a Linha de Leitura;
 - Áudio Bluetooth e Miracast;
 - Outras configurações avançadas.

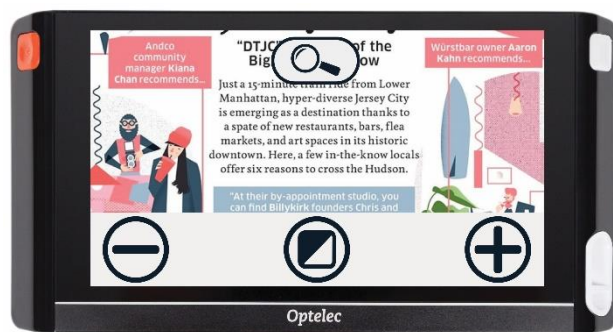

Modo fácil



Modo avançado



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

Recursos no modo fácil

Ajustando a ampliação

Para alterar a ampliação, basta tocar na tela. A barra de botões será exibida na parte inferior da tela ou no lado direito da tela, dependendo da posição da barra de botões escolhida. A posição da barra de botões pode ser selecionada no menu. Consulte o capítulo 7 para obter mais informações sobre como alterar a posição da barra de botões. Na barra de botões, toque no botão + para aumentar ou no botão - para diminuir a ampliação. Como alternativa, use o gesto de dois dedos para alterar a ampliação. Toque na tela para ocultar a barra de botões. A barra de botões será ocultada automaticamente quando a tela não for tocada por 10 segundos.

Selecionando um modo de visualização


Tocar no botão Contraste no meio da barra de botões permite selecionar um dos seguintes modos de visualização:

- **Modo de foto:** visualização de textos e fotos em cores
- **Modo negativo:** leitura em alto contraste, branco sobre preto
- **Modo positivo:** leitura em alto contraste, preto no branco
- Combinação de cores de **alto contraste 1**
- Combinação de cores de **alto contraste 2**

Recursos no modo Avançado

Hora e data

Para abrir o relógio, toque na tela e toque no ícone "Relógio" na borda direita da tela. Ou deslize do lado direito da tela.

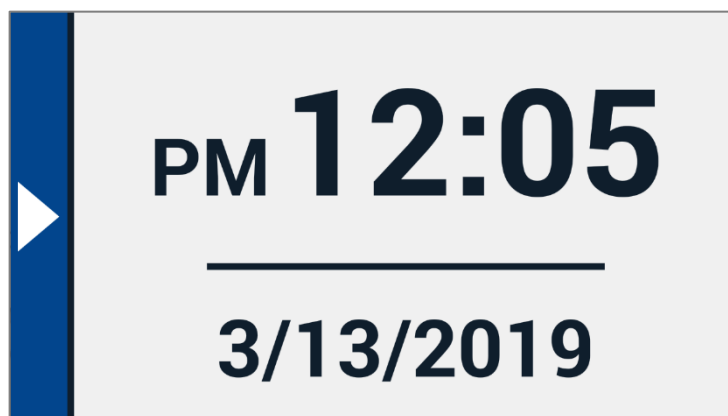

Use a "Barra posterior" para sair da tela de hora e data.

Para definir a hora e a data, toque na hora ou data. Para alterar um valor, toque no campo que você deseja alterar e toque no símbolo para cima ou para baixo para alterar o valor. Toque em "Barra posterior" para sair da tela de definição de hora e data.

TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

Menu

Abrindo e fechando o menu

Para abrir o menu, toque na tela e toque no ícone "Menu" no lado esquerdo da tela. Ou deslize do lado esquerdo da tela. Isso abrirá o menu principal. Para fechar o menu, toque em "Barra posterior".



Os itens exatos no menu irão variar, dependendo se você possui um Compact 6 HD ou 6 HD com fala. Para ativar um botão, toque no botão uma vez. Ativar um botão abrirá uma nova tela de menu ou lista. Para voltar ao menu principal, toque em "Barra posterior". Para ajustar o controle deslizante, toque e segure o botão deslizante enquanto o move para a direita ou esquerda.

O menu principal contém as seguintes opções:

- Voz (somente Compact 6 HD com fala).
- Linha Ligado / Desligado.
- Status da bateria.
- Salvar.
- Abrir.
- Controle deslizante de brilho.
- Configurações.

Voz (somente Compact 6 HD com fala)



Para selecionar uma voz, idioma e idioma do menu, ou para adicionar ou remover uma voz ou idioma, abra o menu e toque no botão "Voz".

Selecionando uma voz, idioma e idioma do menu

Este item de menu permite selecionar a voz e o idioma de leitura. Para selecionar outra voz de leitura, toque no ícone de voz no canto superior esquerdo do menu principal para abrir a lista com vozes pré-selecionadas. Cada voz representa um idioma. Toque em uma voz para selecionar a voz. Se o ajuste da voz de leitura resultar em uma mudança de idioma, os menus mudarão automaticamente para esse idioma.

Adicionando ou removendo uma voz ou idioma

Para adicionar ou remover uma voz ou idioma, toque no ícone de voz no canto superior esquerdo do menu principal. Na lista de vozes pré-selecionadas, toque no botão "Adicionar / Remover". Para adicionar ou remover uma voz de leitura, selecione o idioma da lista tocando no idioma. Isso exibirá uma lista com as vozes disponíveis para o idioma selecionado. Para ativar uma voz de leitura, selecione-a na lista tocando nela. Uma marca de seleção na frente do nome da voz indicará se está ativada. Quando a voz está ativada, ela estará disponível no botão "Voz" no menu principal. Ao desmarcar uma voz, a voz será removida das vozes de leitura disponíveis. Os idiomas nos quais uma voz de leitura está selecionada aparecerão no topo da lista e serão marcados com uma marca de seleção.

Ajustando o idioma e a voz no Modo Fácil

No modo Fácil, você não pode acessar o Menu. Para ajustar o idioma ou voz no Modo Fácil, pressione e segure o botão "Áudio" para ir diretamente para o menu Voz e siga as etapas descritas acima.

Linha Ligado / Desligado

O Compact 6 HD pode exibir uma linha de leitura para ajudá-lo a posicionar o Compact 6 HD diretamente no documento. Para ativar a linha de leitura, toque no botão "Linha". Toque neste botão novamente para ocultar a linha de leitura. A posição da linha de leitura pode ser definida no menu de configurações.

Status da bateria

O status da bateria é mostrado no canto superior direito da tela. Se você tocar no ícone da bateria, uma nova tela será aberta mostrando um ícone ampliado e o status da bateria, o botão "Acerca" e a "Seta para trás" para retornar ao menu principal. O símbolo de raio indica que a bateria está carregando.

Acerca

Toque no botão "Acerca" na tela da bateria para ver a versão do aplicativo.

Salvar

Para salvar um instantâneo, abra o menu e toque no botão "Guardar".

- Faça uma foto usando o botão de foto;
- Abra o menu;
- Pressione o botão Guardar para salvar a foto;
- O menu será fechado e a foto será mostrada.


Se não houver uma foto para salvar, ou se a foto já tiver sido salva, o botão "Guardar" ficará oculto.

Abrir

Para abrir uma foto, abra o menu e toque no botão "Abrir". Uma lista de miniaturas de fotos salvas será exibida, mostrando em primeiro a foto salva recentemente. Se houver mais fotos do que cabem na tela, deslize para cima e para baixo para rolar pela lista de fotos. Toque na miniatura da foto para abri-la.



Abra para visualizar as fotos salvas

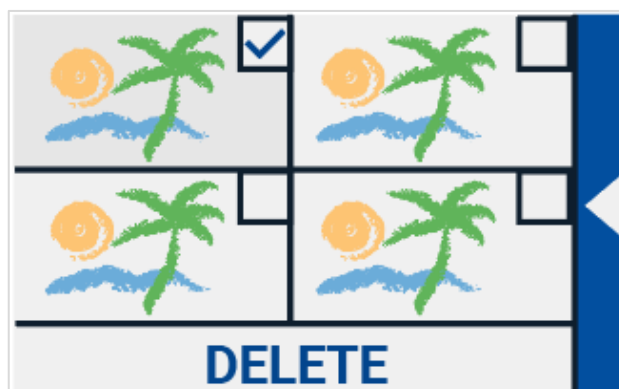

Eliminar fotos

Eliminar

Para Eliminar uma foto, abra o menu e toque no botão "Abrir". Na tela aberta, toque no botão "Eliminar". Uma lista de miniaturas de fotos salvas será exibida, mostrando em primeiro a foto salva recentemente. Cada foto tem uma caixa de seleção no canto superior direito. Para selecionar uma foto, marque a caixa de seleção. Toque no botão "Eliminar" para eliminar as fotos selecionadas. Para eliminar todas as fotos, toque no botão "Eliminar" sem selecionar uma foto. Você será solicitado a confirmar a exclusão de todas as fotos. Para excluir todos as fotos, selecione "Sim". Para cancelar a exclusão de todas as fotos, selecione "Não". Ambas as opções retornarão à lista de fotos. Toque na "Barra posterior" para retornar à tela "Abrir". Toque na "Barra posterior" novamente para retornar ao menu principal.

Ajustando o brilho


Use o controle deslizante com o ícone de sol para aumentar ou diminuir o brilho da tela.

Configurações

Toque no botão "Configurações" para entrar no menu configurações. O botão "Configurações" é o botão com o ícone de engrenagem no canto inferior direito.

O menu configurações contém os seguintes botões:

- Cor.
- Visualizar (somente Compact 6 HD com fala).
- Miracast.
- Bluetooth (apenas Compact 6 HD com fala).
- Linha.
- Botões.
- Tema.
- Colunas (apenas Compact 6 HD com fala).

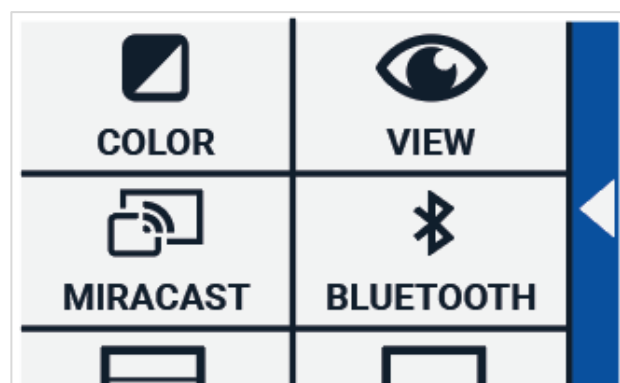

- Luz.
- Som.
- Suspende.
- Idioma (somente Compact 6 HD).
- Restaurar.

Cor

No menu de configurações, toque no botão "Cor" para selecionar as cores preferidas de alto contraste. O Compact 6 HD suporta quatro modos de alto contraste. Para cada um desses quatro modos, as cores de primeiro e segundo plano podem ser selecionadas. Três dos modos de alto contraste podem ser desativados.



O primeiro modo de alto contraste no canto superior esquerdo é necessário.

Para alterar as cores do primeiro plano e do plano de fundo, toque na seta para cima ou para baixo ao lado do modo que deseja alterar. Você percorrerá cada um dos modos disponíveis e poderá parar no que preferir. Selecione o símbolo "X" para desativar o modo de alto contraste. Toque em "Barra posterior" para retornar ao menu de configurações.

Visualizar (somente Compact 6 HD com fala)



No menu de configurações, toque no botão "Visualizar" para configurar como deseja exibir o texto capturado ao usar o Texto-para-fala.

Para configurar como todo o texto capturado é mostrado, pressione o botão "Modo" para




percorrer os diferentes modos de visualização: Original, Linha e Coluna.

Para configurar como a palavra lida em voz alta é exibida, pressione o botão "Destacar" para percorrer os diferentes modos de destaque: Retângulo e Sublinhado.

Ao usar o "Texto-para-fala", toque no botão "Modo" na barra de botões para visualizar o texto capturado no modo de visualização que você acabou de selecionar e percorrer as cores de alto contraste configuradas.

Miracast: conexão sem fio a um monitor ou TV

Miracast é um padrão para uma conexão sem fio a um monitor. Pode ser descrito como HDMI via Wi-Fi ", substituindo o cabo do Compact 6 HD para o monitor ou a TV. Para poder usar a função Miracast do Compact 6 HD, seu monitor ou TV precisa oferecer suporte ao Miracast. Consulte o manual do monitor ou a TV e a documentação para verificar se o seu dispositivo suporta o recurso Miracast.

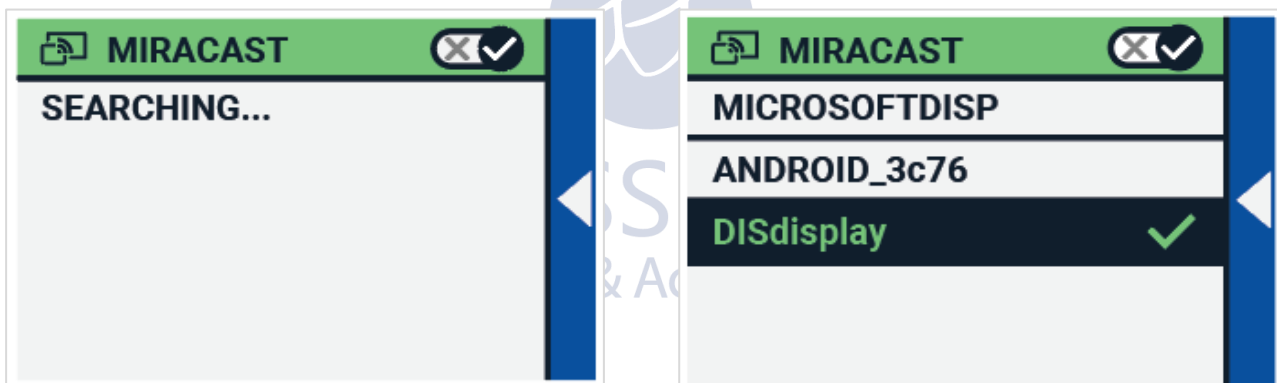


Para conectar seu Compact 6 HD a um monitor ou TV via Miracast, toque no botão "Miracast" e ligue o Miracast. Uma lista com os dispositivos disponíveis será exibida. Clique em um dispositivo para conectar. Pode levar até um minuto para estabelecer a conexão. Toque no dispositivo novamente para desconectar. Quando uma conexão Miracast é estabelecida, o áudio e o vídeo são transmitidos para a TV ou monitor. Para garantir uma boa conexão, o Compact 6 HD precisa estar a um metro ou três pés do monitor ou da TV. Dependendo da conexão, um pequeno atraso no vídeo e/ou áudio pode ser percebido.

Bluetooth (apenas Compact 6 HD com fala)




Para conectar um alto-falante ou fone de ouvido Bluetooth, toque no botão "Bluetooth" e ative o Bluetooth.

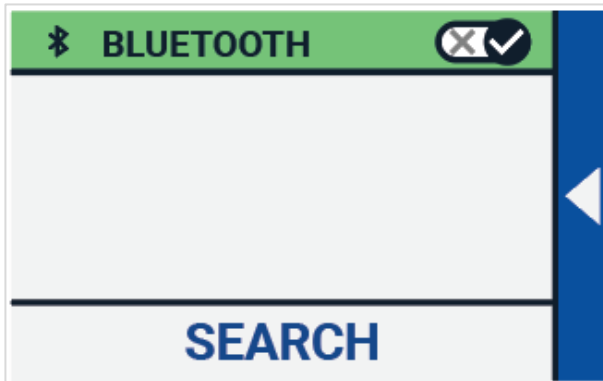

Uma lista com dispositivos emparelhados está sendo exibida.

Se nenhum alto-falante ou fone de ouvido estiver emparelhado, toque no botão "Pesquisar" para procurar os dispositivos disponíveis. Antes de iniciar a pesquisa por Bluetooth, verifique se o alto-falante ou o fone de ouvido está ligado e definido como detectável. Consulte o manual do alto-falante ou do fone de ouvido sobre como mudar o dispositivo para o modo detectável por Bluetooth. Para emparelhar o alto-falante ou o fone de ouvido, toque no nome do dispositivo e, se necessário, digite o código PIN. Consulte o manual do alto-falante ou fone de ouvido para obter o código PIN do dispositivo.

Quando o dispositivo estiver emparelhado, para conectar o alto-falante ou o fone de ouvido, toque no dispositivo. Você será solicitado a conectar ou esquecer o dispositivo. Toque no botão "Conectar" para fazer a conexão.

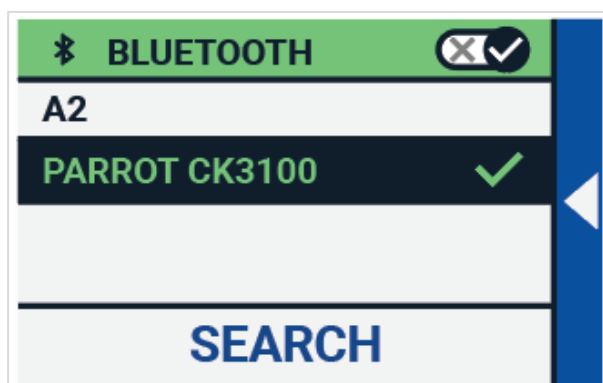

Para indicar que um dispositivo está conectado, o dispositivo conectado terá uma marca de seleção e será exibido em azul.

Para desemparelhar/esquecer um dispositivo, toque no botão "Esquecer". O dispositivo será removido da lista com dispositivos emparelhados.

Nota: Somente fones de ouvido e alto-falantes Bluetooth versão 4.0 ou superior são suportados.

Linha

Este item de menu permite alterar a posição da linha de leitura para uma de suas seis posições; topo horizontal, centro horizontal, fundo horizontal, esquerda vertical, centro vertical, direita vertical. Por padrão, a linha de leitura é definida horizontalmente no centro da tela. Ao alterar a posição da linha de leitura, a linha de leitura será habilitada automaticamente. A linha de leitura pode ser desabilitada no menu principal.

Botões

Este item de menu permite que você altere a posição da barra de botões para uma de duas posições: inferior ou lateral. Dependendo da sua preferência, você pode alterar a posição da barra de botões na parte inferior ou lateral da tela. A configuração padrão é "Inferior".

Observe que a posição da barra pode ser diferente, dependendo do acessório em uso.

TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

Tema

Este item de menu permite selecionar um tema claro ou escuro para os botões e menus.

Colunas (apenas Compact 6 HD com fala)



Este item de menu permite que você escolha se deseja que o Compact 6 HD com fala leia apenas colunas inteiras ou também colunas incompletas. Por padrão, Ler colunas completas apenas está selecionado. Observe que se você selecionar a leitura de colunas incompletas, nem todos os caracteres e palavras serão totalmente capturados, o que pode resultar em texto incoerente.

Luz

Este item de menu permite ativar ou desativar as luzes no modo Lupa e no modo Visão geral. As luzes da lupa estão localizadas à esquerda e à direita da câmera da lupa. Por padrão, as luzes de leitura estão ativas para obter uma qualidade de imagem ideal.

As luzes de visão geral estão localizadas ao lado da câmera de visão geral. Por padrão, a luz de visão Panorâmica está desativada.

Som

Este item de menu permite alterar o volume, silenciar o feedback de áudio e habilitar ou desabilitar o feedback de vibração. Por padrão, som e vibração estão habilitados.

Suspender

O tempo de espera define o tempo após o qual o Compact 6 HD entra no modo de suspensão para economizar energia. Pressionar qualquer botão tirará a unidade do modo de suspensão. Por padrão, o tempo de suspensão é definido para 5 minutos depois que nenhum botão é pressionado ou nenhum movimento do Compact 6 HD é detectado.

Idioma (somente Compact 6 HD)

Este item de menu permite que você escolha o idioma da Compact 6 HD. Toque para selecionar seu idioma de menu preferido.

Restaurar

Toque neste item de menu se desejar restaurar as configurações padrão. Você será solicitado se tiver certeza de restaurar os padrões. Para restaurar os padrões, selecione "Sim". Para cancelar a restauração dos padrões, selecione "Não".

APÊNDICE A: Informação técnica

Ampliação: <0.5 – >21 vezes.

Modos de visualização: Modo de foto colorida;
Alto contraste, branco no preto;
Alto contraste, preto no branco;
Combinação de cores de alto contraste 1;
Combinação de cores de alto contraste 2.

Foco: Foco automático.

Proporção de alto contraste: 700:1.

Tela de alto brilho: 350 cd/m².

Tela: 5.94" TFT.

Resolução da tela: 1280 x 720.

Dimensões: 183 x 95 x 14 mm / 7,2 x 3,7 x 0,55 pol.

Peso do Compacto 6 HD: 270 gramas / 9,5 onças.

Peso do Suporte de leitura: 110 gramas / 3.0 onças.

Bateria: Média de 3 horas de uso contínuo, média de 2 horas de tempo de carregamento.

Bateria Li-poly: Recarregável, 3.7V 2600mAH.

Tipo de fonte de alimentação: Intertek, MX15Z-0502500VU.

Classificação da potência de entrada - Adaptador: 100-240V, 50-60Hz, 0.4 A.

Classificação potência de saída – Unidade: DC5V-2.5A.



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

Condições de funcionamento

Temperatura: + 10 ° C a 35 ° C / 50 ° F a 95 ° F.

Umidade: < 70%, sem condensação.

Altitudes: até 3000 m (9842 pés).

Pressão: 700 - 1060 hPa.

Condições de armazenamento e transporte

Temperatura: + 10 ° C a 40 ° C / 50 ° F a 104 ° F.

Umidade: <95%, sem condensação.

Altitudes: até 12192 m (40000 pés).

Pressão: 186 - 1060 hPa.



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

APÊNDICE B: Segurança

Uso pretendido:

O Compact 6 HD foi projetado para ser usado em um ambiente hospitalar para fins gerais, como revisar registros médicos. O Compact 6 HD não pode ser usado para procedimentos cirúrgicos em combinação com sistemas de suporte à vida.

Aviso: As decisões críticas de diagnóstico não devem se basear nas imagens exibidas por este dispositivo.

- Não exponha o Compact 6 HD a calor excessivo ou luz solar direta para evitar o risco de incêndio.
- Não remova nenhuma parte do Compact 6 HD. Entre em contato com uma organização de serviços autorizados Optelec em sua área.
- Para evitar riscos de danos elétricos, mantenha o Compact 6 HD longe de fluidos e produtos químicos.
- Manuseie o Compact 6 HD com cuidado. O manuseio inadequado danificará os componentes internos.
- Não use o Compact 6 HD perto de dispositivos médicos inadequadamente blindados.
- Não tente abrir o compartimento da bateria ou tente remover a bateria.
- Entre em contato com seu revendedor para fazer a manutenção deste equipamento, se necessário. **Não desmonte sua unidade**, pois isso anulará a garantia.
- Sempre desconecte e desligue a unidade antes da limpeza. Use um pano macio e seco para limpar o exterior. Não use produtos de limpeza ou materiais abrasivos, pois eles danificarão sua unidade.

O uso do Compact 6 HD diferente do descrito neste manual o excluirá das condições de garantia.

APÊNDICE C: Condições de garantia

A Optelec garante que o Compact 6 HD, em vigor a partir da data de entrega, esteja livre de defeitos de material e de fabricação.

A garantia não é transferível e não se aplica a grupos e multiusuários. O Compact 6 HD foi projetado para que o comprador individual seja usado em casa ou em qualquer lugar. A Optelec se reserva o direito de reparar ou substituir qualquer Compact 6 HD adquirido por um produto similar ou aprimorado.

Em hipótese alguma, a Optelec ou seus fornecedores serão responsabilizados por quaisquer danos indiretos ou consequentes. Esta garantia é válida apenas quando reparada no país da compra original e com selos intactos. Para reclamações ou serviços adicionais sobre garantia durante ou após o período de garantia, entre em contato com o seu distribuidor Optelec.

A Optelec não é responsável por quaisquer usos deste dispositivo que não sejam os descritos neste manual. O uso do Compact 6 HD diferente do descrito neste manual o excluirá das condições de garantia.

A confiabilidade do aterramento só pode ser alcançada quando a fonte de alimentação Compact 6 HD estiver conectada a uma tomada com certificação.

Aviso - Não modifique este equipamento sem a autorização do fabricante.

Aviso - Para evitar risco de choque elétrico, este equipamento deve ser conectado apenas a uma tomada aterrada.

Cuidado: O adaptador fornecido faz parte do produto Compact 6 HD.



Cuidado, consulte DOCUMENTOS ACOMPANHANTES.



Siga as instruções de operação ou consulte as instruções de uso.



Suspensão.



Corrente direta.

Conformidade RoHS

Este produto está em conformidade com a Diretiva 2011/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 03 de janeiro de 2013, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (RoHS) e suas emendas.

Aviso da União Europeia

Os produtos com marcação CE estão em conformidade com a Diretiva EMC (2014/30 / EU), a diretiva MDD (93/42 / EEC) e a diretiva de baixa tensão (2014/35 / EU) emitida pela Comissão da Comunidade Europeia.

AVISO: O uso de acessórios, transdutores e cabos, com exceção dos transdutores e cabos vendidos pelo fabricante do Compact 6 HD como peças de reposição para componentes, pode resultar em aumento de emissões ou diminuição da imunidade do Compact 6 HD.



Este dispositivo possui a marca de aprovação CE e FCC.

Declaração da Federal Communications Commission (FCC):

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das regras da FCC. Esses limites foram criados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorra em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, que pode ser determinada desligando e ligando o equipamento, recomenda-se que o usuário tente corrigir a interferência usando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.

- Consulte o revendedor ou um técnico experiente de rádio / TV para obter ajuda.

AVISO: Você é avisado de que alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem anular sua autoridade para operar o equipamento.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e
- (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida; incluindo interferências que podem causar operação indesejada.

AVISO: Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto. Por favor, elimine as baterias usadas de acordo com os regulamentos de descarte e reciclagem aplicáveis em seu país ou região.



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade